

HR 検査結果連動システム

ダイレクトに電子カルテへ取込みます

NIHON KOHDEN

日本光電工業株式会社 様の院内検査機器をご使用のお客様へ

外注検査のデータは自動取得出来るのに、院内に導入した検査機器の

データは手入力...

この手間を削減し、

そして、


低価格

も実現。

全自動血球計数器



RS-232C 接続

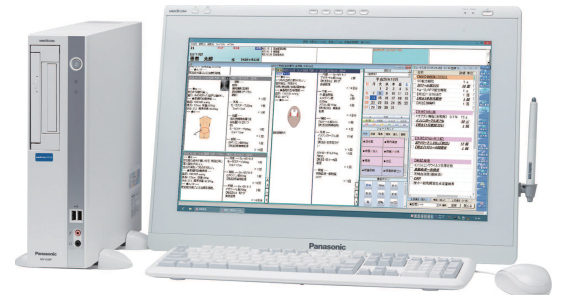

Medicom-HR III

全自動血球計数器と RS-232C にて接続し、
検査結果データを取得・保存します。

自動取込

検査結果の手入力も必要ありません!

検査結果画面

項目名	基準値	H26. 6.17	H26. 5. 8	H26. 4.20	H26. 3.12	H26. 2.10	H26. 1.15
WBC (院内)	9.0 ~ 40.0	9.3	9.8	4.2	8.2	9.2	7.8
RBC (院内)	80.0 ~ 400.4	8.47	7.41	8.30	8.72	6.79	4.79
HGB (院内)	17.5 ~ 13.5	17.5	19.0	13.0	11.5	10.7	13.7
HCT (院内)	52.0 ~ 88.0	44.2	40.5	52.1	25.1	25.1	38.1
PLT (院内)	40.0 ~ 100.0	232	210	250	248	256	248
MCV (院内)	100.0 ~ 84.0	95.1	90.7	82.1	84.1	79.6	81.6
MCH (院内)	85.0 ~ 27.0	29.1	32.1	35.5	30.5	28.5	28.6
MCHC (院内)	36.0 ~ 31.0	32	34	32	38	40	35
MPV (院内)	14.0 ~ 11.5	12.0	13.1	14.3	12.3	12.1	12.4
PDW (院内)	10.0 ~ 6.0	7.9	8.6	10.6	12.6	10.6	8.6
PCT (院内)	15.0 ~ 10.0	9.5	12.5	12.1	9.1	11.1	15.1
LYM% (院内)	1.0 ~ 0.1	0.98	0.28	0.53	0.235	0.215	0.211
LYM# (院内)	1 ~ 9	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	1.7
LYM% (院内)	49.0 ~ 11.0	30.0	14.0	14.2	20.2	24.6	21.6
MON% (院内)	3 ~ 2	2.2	1.2	2.8	0.8	0.6	0.8
GRA% (院内)	9.0 ~ 0.0	9.1	9.2	9.5	10.5	9.5	10.5
GRA# (院内)	5 ~ 4	4.1	5.9	7.3	6.3	6.3	5.3
GRA% (院内)	85.0 ~ 42.0	64.4	72.2	84.9	64.9	69.9	67.9
CRP (院内)	7 ~ 6	6.1	5.9	5.1	3.1	3.3	2.3



全自動血球計数器 MEK-6500 シリーズ セルタックα

さらに進化した使いやすさ。白血球 3 分類を含む 19 項目を迅速測定！

- ・白血球 3 分類を含む 19 項目を検査。
- ・画面が見やすく、立ったままでもらくらく操作。
- ・電源 ON 時の内部点検も電源 OFF 時の洗浄も全自動です。
- ・真空採血管のキャップをしたまま測定できるクローズドモードと、容器の形にこだわらずに測定できるオープンモードを標準装備。
- ・必要サンプル量は、静脈血なら 30 μ L。採血量が少ない場合でも、キャピラリーモード（アダプタセット別売）なら、わずか 10 μ L の微量血から測定可能です。
- ・溶血 Hb 試薬にはシアンを用いないヘモライナック・3N を使用。環境にも配慮したクリーンな試薬です。
- ・測定終了ごとに検知孔の汚れを瞬で除去する電氣的ツマリ除去機能搭載。
- ・検査結果のプリントアウトデータには、基準値との比較グラフやチャート図など、測定数値以外の情報も豊富です。



臨床化学分析装置 CHM-4100 セルタックケミ

"患者さんのために" をカタチに - 簡単で迅速な、使いやすさを追求した新たな POCT 対応装置をご提案

- ・遠心分離などの前処理が不要。全血簡単操作です。
- ・内蔵ヒータを搭載。保冷库・薬品庫から試薬を出してすぐに測定が可能。
- ・測定時間が短い。
- ・一目でわかる画面デザイン。
- ・測定は簡単 3 ステップ。
- ・高精度で安定したデータを提供。
- ・試薬情報自動読み込みで管理がしやすい試薬。



その他のご希望の機種がございましたら、ご相談頂ければ、接続可能の可否を検討を致します。

アンケートにご協力ください

当社「メディコムエイド」では常に「患者様・医療機関様へ喜んで頂ける商品・システムの提案」を心掛けて居ります。つきましては、以下の「アンケート」へご協力を賜ります様、お願い申し上げます。（複数回答可）

■検査機器連動システムにご興味は持たれましたか？

興味がある（詳しい話が聞きたい） 興味がある（見積りを希望） 興味がない その他

■現在、院内検査機器をご使用ですか？

使用している（メーカー： _____ 機種： _____）
導入予定である（ _____ ヶ月以内） 使用していない

■その他ご自由にご記入ください

医療機関名： _____

TEL： _____

住所： _____

お近くの拠点まで FAX で返信頂ければ幸いです。

■お問い合わせ先

株式会社 **メディコムエイド** <http://www.medicomaid.com/>

本社 / 榎原営業所 〒634-0844 奈良県榎原市土橋町 540 番地 3
TEL 0744-24-2511 FAX 0744-25-6251

奈良営業所 〒630-8115 奈良市大宮町 4 丁目 255 まつもりビル 2・4
TEL 0742-36-5990 FAX 0742-36-6007

京都支店 〒612-8419 京都市伏見区竹田北三ツ杭町 46 番地
TEL 075-643-3100 FAX 075-643-2266

滋賀営業所 〒520-0832 大津市粟津町 4 番 7 号 石山駅前近江鉄道ビル 6 階
TEL 077-531-2588 FAX 077-531-2577

大阪営業所 〒530-0001 大阪市北区梅田 1 丁目 3 番 1-500 大阪駅前第 1 ビル 5 階
TEL 06-6341-5511 FAX 06-6341-5510

メールでのお問い合わせは sales-se@medicomaid.com